



CRMEDICAL

Ficha producto

IMPLANTE DE GLAUCOMA PAUL®


Marca: **ADI**
Advanced Ophthalmic Innovations

Origen: Singapur

El implante de glaucoma PAUL®, es un dispositivo de drenaje para glaucoma diseñado para el control de la presión intraocular mediante la derivación del humor acuoso hacia un reservorio subconjuntival. Su diseño de perfil bajo, junto a un tubo de pequeño calibre, permite una implantación controlada, orientada a reducir el riesgo de complicaciones postoperatorias.

1. Dispositivo de drenaje no valvulado para control sostenido de la presión intraocular
2. Tubo de pequeño diámetro interno (~0,127 mm) para control de flujo y reducción del riesgo de hipotonía
3. Placa de gran superficie (~342 mm²) para una difusión eficiente del humor acuoso
4. Diseño flexible para una adecuada adaptación anatómica
5. Fabricado en silicona médica biocompatible y muy flexible
6. Permite control de flujo inmediato durante la cirugía
7. Contribuye a la disminución de la presión intraocular en las primeras 24 horas



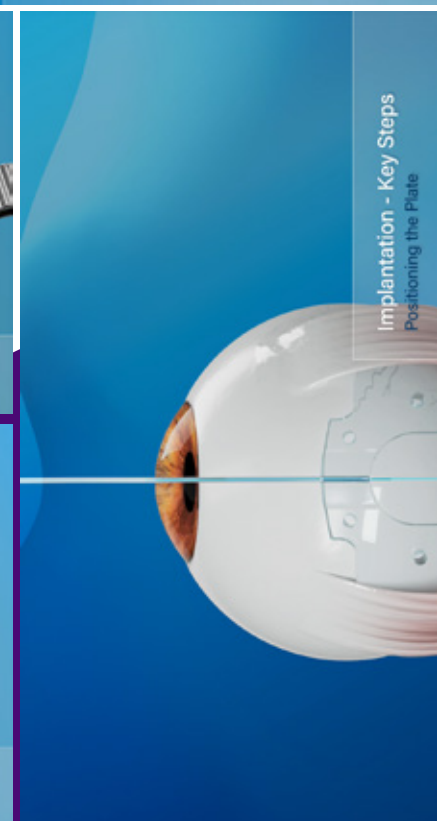

CONTÁCTANOS

+569 9826 7087

jmunoz@crmedical.cl

Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl