



CRMEDICAL

Ficha producto

OPTOS CALIFORNIA

Marca:  **optos**


Origen: Escocia

Angiógrafo retinal de ultra campo amplio diseñado para capturar imágenes de alta resolución del fondo de ojo, permitiendo obtener hasta 200° de visualización de la retina en una sola imagen. Su tecnología avanzada permite realizar estudios completos de la retina central y periférica, integrando distintas modalidades de imagen para apoyar el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías oftalmológicas.

Principales características técnicas:

- Captura de hasta 200° de la retina en una sola toma (aproximadamente 82% de la superficie retinal)
- Captura ultra rápida en menos de 0,4 segundos para mayor eficiencia clínica
- Tecnología no midriática, permite obtener imágenes sin dilatación pupilar
- Software Optos Advance incluido para gestión, análisis y comparación de imágenes
- Sistema multimodal con imágenes en color RGB, red-free, coroidal, autofluorescencia y angiografía
- Integración de modalidades de angiografía como FA e ICG



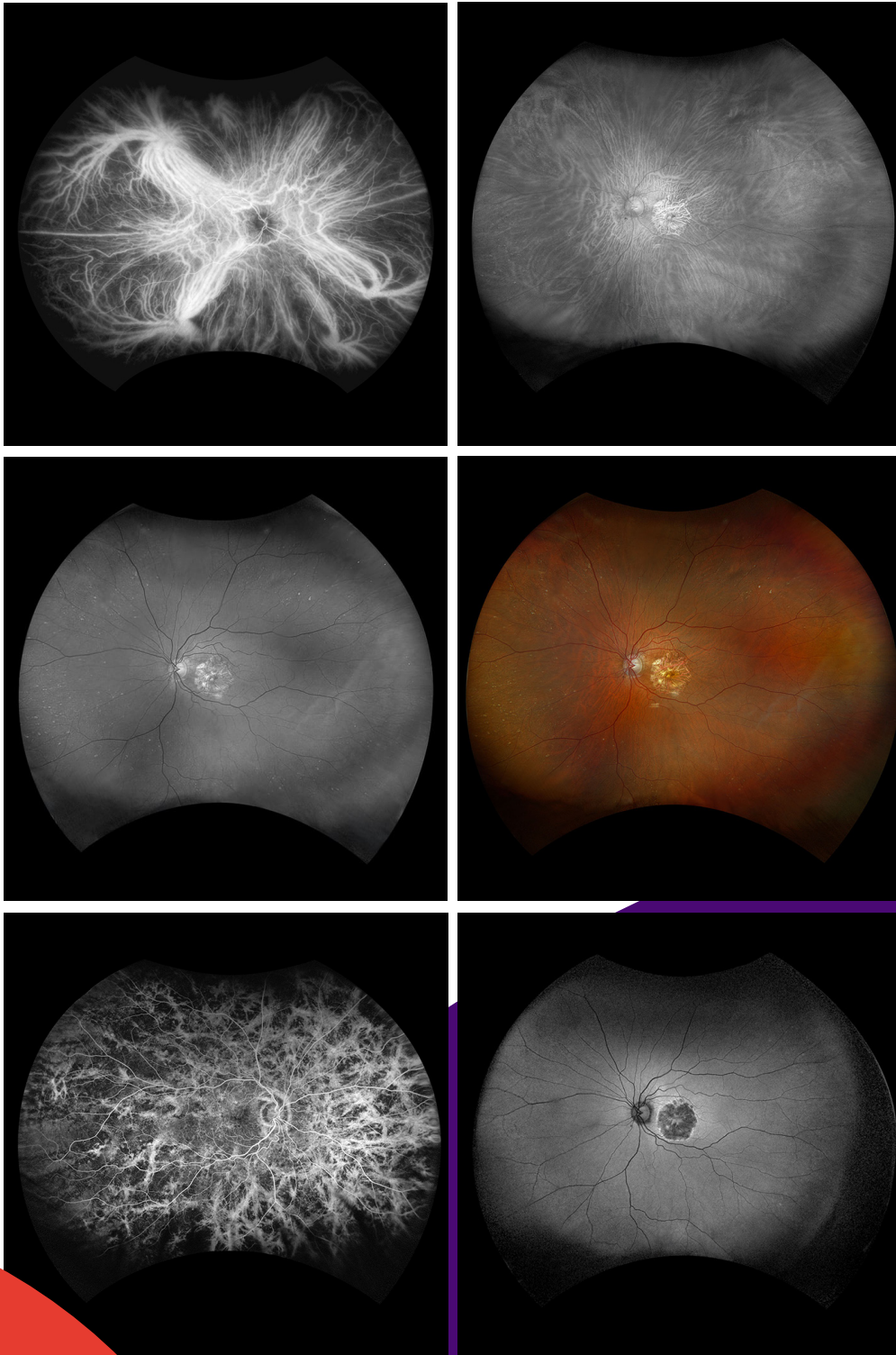

CONTÁCTANOS

☎ +569 9826 7087

✉ jmunoz@crmedical.cl

📍 Antonio Varas 175, of 903 | Providencia - Santiago

www.crmedical.cl